



Forest 3+

für höhere Belastbarkeit

Der Forest 3+ ist ein elektrischer Rollstuhl, der speziell für große Sitzbreiten und für eine höhere Belastbarkeit bis max. 250 kg entwickelt wurde. Komplett mit modernster elektronischer Steuerung und einer Vielzahl von Optionen.



Serienmäßig mit der neuen LiNX Steuerung.



VERMEIREN
we care for you

FOREST 3+ in Zahlen

- Kompakter Rahmen mit einer Sitzbreite ab 500 mm
- Bodenfreiheit bis zu 75 mm
- Die Pendelachse sichert die Fahrstabilität. Alle vier Räder bleiben in Kontakt mit dem Boden, auch bei unwegsamem Gelände (bis zu 10 mm)
- Sitzhöhe 450 mm


V-STAB Technologie beeinflusst das Fahrverhalten des Elektrorollstuhls insoweit, dass bei Fahrmanövern die durch den Joystick gewünschte Fahrtrichtung ohne Joystickkorrekturen bewältigt werden kann unabhängig von Bodenunebenheiten.




Farben (matte und glänzende Farben)



Optionen

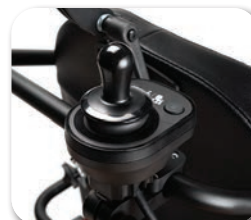

SE09 - Zusätzlicher Controller für Begleitperson

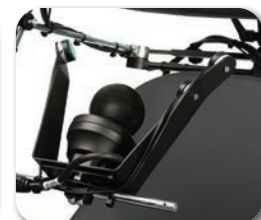

SE04 Kinnsteuerung



SE55 - verstärkte Steuerung



L58 - verstellbare Komfort-Kopfstütze



SE83 - Mini joystick



B66MAL Hemiplegie Armauflage

Technische Informationen

■ Gesamtbreite	705 / 720 / 760 / 820 / 870 mm
■ Gesamtlänge	1145 / 1163 mm
■ Gesamthöhe	1100 mm
■ Sitzhöhe	450 mm
■ Sitzbreite	500 / 550 / 600 / 650 / 700 mm
■ Sitztiefe	450 - 550 mm

■ Batterie / Motor	2 x 12V / 80Ah - 350W
■ Geschwindigkeit	6 km/h* oder 10 km/h*
■ Reichweite	49 km*
■ Gewicht	134,35 kg
■ Maximales Benutzergewicht	250 kg
■ zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

VERMEIREN Austria GmbH

Schärdinger Straße 4
A-4061 Pasching
Österreich

www.vermeiren.at
info@vermeiren.at



**Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.**